

**NEW!**


# PrimaFit™

## External Urine Management System for Females

### Address the #1 CAUTI risk factor, the indwelling catheter

PrimaFit is an external urine management system designed to help manage urinary incontinence in female patients and promote early catheter removal, addressing the #1 risk factor of catheter-associated urinary tract infections (CAUTI). PrimaFit serves as an alternative to incontinence pads, diapers, or at times, catheters, while transitioning patients to independent continence.

When properly positioned, PrimaFit's ultra-soft wicking fabric absorbs and diverts urine away from the patient's skin. Urine is then absorbed into the system's core and suctioned into a collection canister, helping keep the skin dry and addressing a risk factor of incontinence-associated dermatitis (IAD).

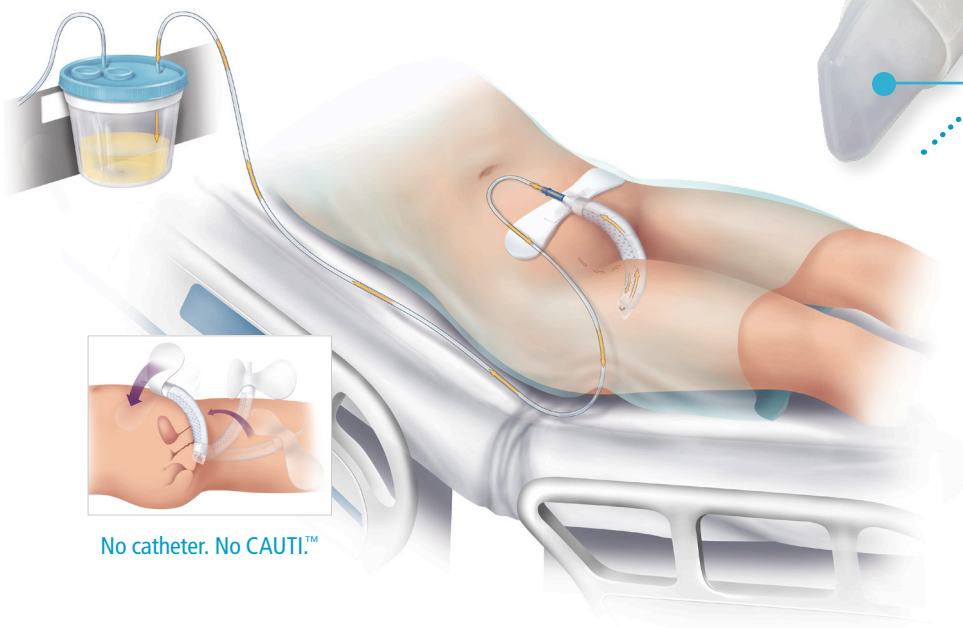

No catheter. No CAUTI.™



**Easy connection**  
Tiered Connection Port allows for easy connection to hospital tubing

**Gentle, stays in place**  
Sure-Stay Silicone Adhesive Pad keeps device in place, easy and gentle removal

**Helps keep skin dry**  
Ultra-soft wicking fabric absorbs and diverts urine away from skin

**Flexible fit**  
Flex-Fit Core contours to patient anatomy and maintains shape for the duration of use

**Stays in place**  
Tapered End Cap gently fits in perineal area to secure device in position

Approximately **75%** of hospital-acquired UTIs are associated with an indwelling urinary catheter.<sup>1</sup>



**PrimaFit**  
(1) PrimaFit  
40 devices/case  
Reorder #5400



**Clean-up Cloths with PrimaFit**  
(1) package of 3 medium weight clean-up cloths  
(1) PrimaFit  
40 systems/case  
Reorder #5452

**NOUVEAU!**


# PrimaFit™

Dispositif externe de prise en charge de l'urine pour femmes

## S'attaque au principal facteur de risque d'IVU associée au cathéter, la sonde à demeure

PrimaFit est un dispositif externe de prise en charge de l'urine conçu pour contribuer aux soins de l'incontinence urinaire chez la femme et favoriser le retrait précoce de la sonde, contrant ainsi le principal facteur de risque d'infection des voies urinaires (IVU) associée au cathéter. PrimaFit constitue une solution de rechange aux serviettes et culottes d'incontinence, ou parfois à la sonde, ainsi qu'une mesure de transition entre la sonde et la continence autonome.

Lorsqu'elle est correctement positionnée, la mèche de tissu ultra-doux dont est fait le PrimaFit absorbe l'urine et l'éloigne de la peau de la patiente. L'urine pénètre ensuite dans la couche centrale et est aspirée dans un récipient collecteur, pour mieux garder la peau au sec et s'attaquer à un facteur de risque de la dermatite d'incontinence (DI).

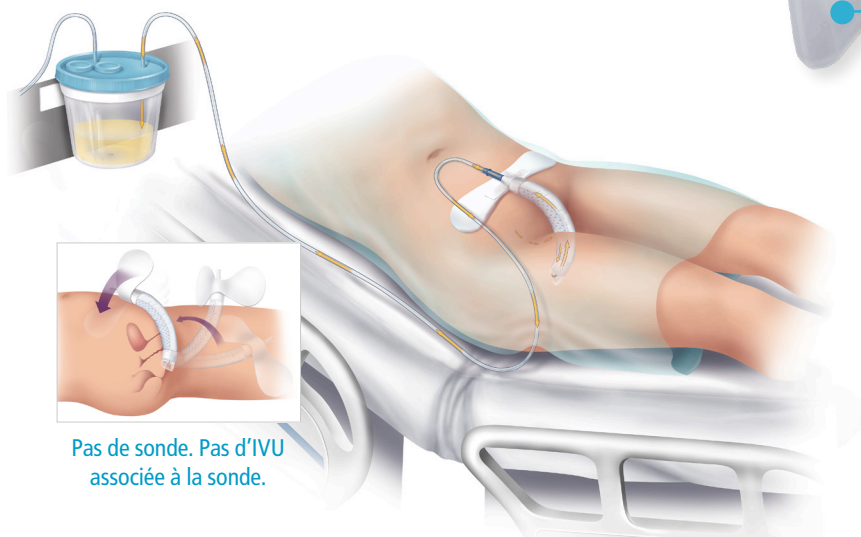

Pas de sonde. Pas d'IVU associée à la sonde.

### Raccord facile

Un port de connexion étagée facilite le raccord à la tubulure de l'hôpital.

### Adhésif fiable et doux

La bande adhésive de silicone tient le dispositif bien en place et s'enlève aisément, en douceur.

### Aide à garder la peau au sec

La mèche de tissu ultra-doux absorbe l'urine et l'écarte de la peau.

### Ajustement flexible

La couche centrale du dispositif épouse les contours anatomiques de la patiente et garde sa forme durant toute son utilisation.

### Bonne tenue

L'embout conique s'ajuste en douceur à la région périnéale pour garder le dispositif en place.

Environ

**75 %** des IVU nosocomiales

sont associées au port d'une sonde urinaire à demeure<sup>1</sup>.



**PrimaFit**  
(1) PrimaFit

Caisse de 40 dispositifs  
**No d'article : 5400**



**Débarbouillettes pour l'incontinence avec le PrimaFit**

(1) paquet de 3 débarbouillettes d'épaisseur moyenne  
(1) PrimaFit

40 systems/case  
**Reorder #5452**